

AT1R

ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS ANTI-AT1R

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Reconhece os anticorpos anti-AT1R
- Procedimento simples baseado na técnica ELISA
- Padrões e controlos inseridos no teste para validar os resultados de forma confiável
- Resultados com simples interpretação




MÉTODO BASEADO NO TESTE ELISA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS NÃO-HLA CONTRA ATR1 EXPRESSO EM DIVERSOS ÓRGÃOS SÓLIDOS

A One Lambda possui a solução para detectar anticorpos biomarcadores que se formam contra o receptor de Angiotensina II tipo I (AT1R). O AT1R é expresso em diversos órgãos, incluindo o coração, fígado, pulmões, rins, entre outros. O ensaio AT1R é exclusivo da One Lambda e supre a necessidade de detectar anticorpos não-HLA para AT1R.

ANTICORPOS NÃO-HLA CONTRA AT1R?

PRINCÍPIO

O soro do receptor do transplante é incubado em uma placa de microtitulação pré-tratada com AT1R. Os anticorpos anti-AT1R se ligam ao AT1R e são detectados com anticorpo IgG anti-humano conjugado com peroxidase. Uma reação enzimática subsequente com a peroxidase cria um padrão cromogénico que se correlaciona com a concentração de anticorpos anti-AT1R.

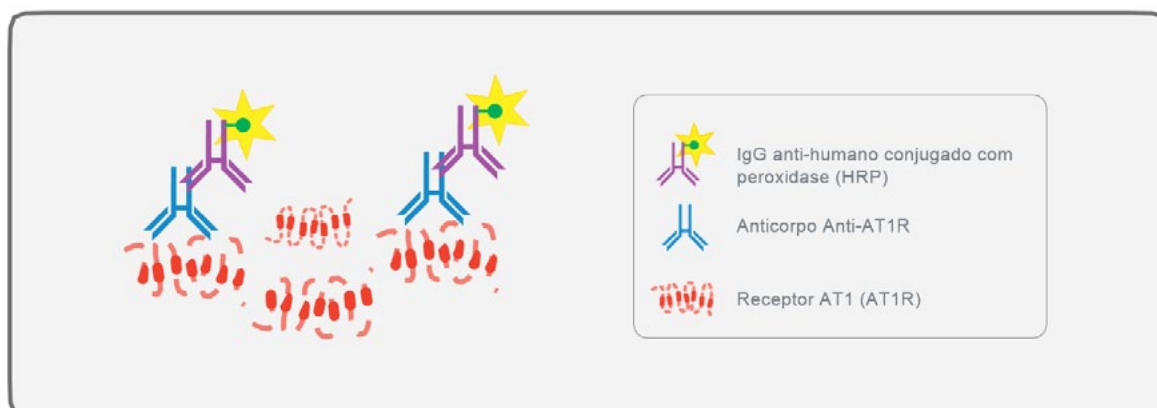

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PRODUTO (Para uso em pesquisa somente. Não utilizar em procedimentos diagnósticos.)	TESTES	CATÁLOGO
AT1R - EIA para Determinação Quantitativa de Anticorpos Anti-AT1R (RUO)	40 testes	EIA-AT1RX

BIOMETRIX[®]
D I A G N Ó S T I C A

Para maiores informações, consulte-nos: www.biometrix.com.br

 **ONE LAMBDA**
A Thermo Fisher Scientific Brand

© 2016 One Lambda, Inc., A Thermo Fisher Scientific Brand. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your local sales representative for details.

21001 Kittridge Street
Canoga Park, CA 91303-2801, USA
TEL: 818.702.0042 | 800.822.8824 (except greater LA area)
FAX: 818.702.6904 | 800.992.2111 (U.S. and Canada Only)
INTERNATIONAL: Contact your local distributor



MKT-PS-AT1R-000 | APRIL 2016 | REV 0