

DETECÇÃO DE ANTICORPOS

C1qSCREEN™ *Somente para uso em pesquisa

DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-C1Q CONJUGADO COM PE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Identifica anticorpos que se ligam ao complemento
- Bead de controle interno positivo incluso
- Software de análise robusto



CONSTRUA UM MELHOR PERFIL DE FORMA RÁPIDA

O C1qScreen combina a sensibilidade da tecnologia de fase sólida do Luminex com a especificidade da detecção de antígeno único anti-HLA para a detecção de DSA (Donor Specific Antibody) dependente do complemento.


O componente do complemento (C1q) ligado ao complexo antígeno-anticorpo é detectado com um anticorpo anti-C1q conjugado a ficoeritrina (PE). Utiliza o sistema Luminex®- LABScan™ 100 ou LABScan3D™.

A intensidade de fluorescência é medida para indicar a quantidade relativa de anticorpo ligado à amostra.

Além da bead controle interno positivo C1q já inclusa, também estão disponíveis soro controle positivo para Classe I e II e soro controle negativo (cada um vendido separadamente).

C1QSCREEN – UMA FERRAMENTA CONFIÁVEL

Investigue o possível envolvimento do anticorpo fixador de complemento na rejeição mediada por anticorpo. Com o kit C1qScreen, a presença dos anticorpos fixadores do complemento (C1q) pode ser identificada e monitorada no soro, fornecendo informações para criar um melhor perfil de anticorpo.

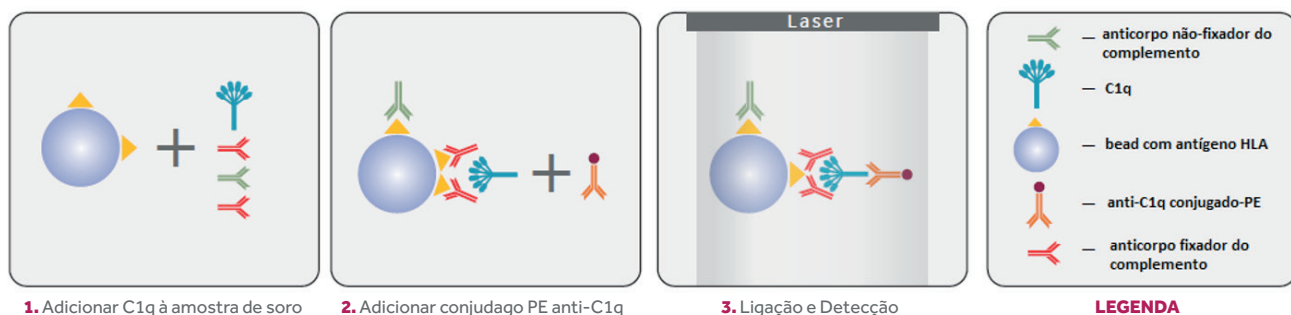

DETECÇÃO DE ANTICORPOS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PRODUTO (Para uso em pesquisa somente. Não utilizar em procedimentos diagnósticos.)	TESTES	CATÁLOGO
C1qScreen™	25 testes	PEC1Q
C1qScreen™ Classe I Controle Positivo	20 testes	C1Q-PC1
C1qScreen™ Classe II Controle Positivo	20 testes	C1Q-PC2
C1qScreen™ Soro Controle Negativo	20 testes	C1Q-NC

BIOMETRIX[®]
D I A G N Ó S T I C A

Para maiores informações, consulte-nos: www.biometrix.com.br

 **ONE LAMBDA**
A Thermo Fisher Scientific Brand

© 2016 One Lambda, Inc., A Thermo Fisher Scientific Brand. All rights reserved. ® Luminex is a trademark of Luminex Corporation. All other trade- marks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your local sales representative for details.

21001 Kittridge Street
Canoga Park, CA 91303-2801, USA
TEL: 818.702.0042 | 800.822.8824 (except greater LA area)
FAX: 818.702.6904 | 800.992.2111 (U.S. and Canada Only)
INTERNATIONAL: Contact your local distributor



MKT-PS-C1QS-000 | MAY 2016 | REV 0